

FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE USO DE LAS CINTAS TESTIGO



La *cinta testigo* consiste en un punto de 15 mm de diámetro de sustrato sintético autoadhesivo impreso con tinta indicadora reactiva.


La tinta indicadora reactiva ha sido calibrada para experimentar diferentes cambios de color en función de la dosis de radiación acumulada recibida, lo que permite controlar de forma rápida y precisa la eficacia del proceso de esterilización.

Nuestras lámparas están certificadas con una longitud de onda (254nm) que realiza la acción germinicida mientras podemos verificar que las lámparas encienden estas estarán efectuando su acción sobre los microorganismos, pero es fundamental verificar esta acción periódicamente como lo dictan las normas.

Instrucciones de uso

1. Despegar la *cinta testigo* del rollo y péguelo en la superficie de la bolsa autoclavable cuyo nivel de esterilización se pretende controlar. Utilizar tantos indicadores como superficies se pretenda verificar. **NOTA:** La *cinta testigo* debe ir forzosamente en el exterior de la bolsa autoclavable.
2. Coloque las bolsas autoclavables dentro de EsteriUV con su *cinta testigo* y espere a que el ciclo de esterilización concluya
3. Una vez finalizado el proceso de esterilización contrastar el color final de cada *cinta testigo* y verificar que sea color morado.

Instrucciones de almacenamiento

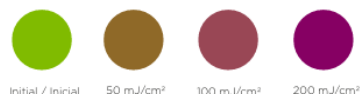

- Expuestos y no expuestos los indicadores químicos deben mantenerse protegidos de la luz.
- Los indicadores no expuestos deben retirarse de su embalaje original ÚNICAMENTE justo antes de ejecutar el proceso de esterilización.
- Mantener en lugar seco, al abrigo de la luz, a una temperatura entre 10-30 °C, Una humedad relativa entre 30-80 %. No mojar.
- No almacenar cerca de agentes desinfectantes o esterilizantes.

Las cintas testigo tienen una fecha de caducidad de 3 años desde la fecha de fabricación si se almacenan bajo las condiciones recomendadas.